

# GÉZATONE

## МАССАЖЕР ДЛЯ ГЛАЗ



### iSee381

ВИБРАЦИОННЫЙ  
МАССАЖ

КОМПРЕССИОННЫЙ  
МАССАЖ

ИНФРАКРАСНЫЙ  
ПРОГРЕВ

МУЗЫКАЛЬНАЯ  
ТЕРАПИЯ



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ  
**СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ**

## РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

СЕАНСЫ МАССАЖА ПРОВОДЯТСЯ ПРИ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ПРОБЛЕМАХ, СВЯЗАННЫХ С ПОВЫШЕННОЙ НАГРУЗКОЙ НА ГЛАЗА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО БЕСПРОВОДНОГО МАССАЖЕРА ISEE 381 СНИМАЕТ СТРЕСС, ПОМОГАЕТ УЛУЧШИТЬ ФУНКЦИЮ ЗРЕНИЯ И СОКРАТИТЬ ПРИЗНАКИ УВЯДАНИЯ КОЖИ В ОБЛАСТИ ГЛАЗ.



ТЕМНЫЕ КРУГИ,  
ОТЕКИ И ПРИПУХЛОСТИ



РЕЗЬ И КРАСНОТА,  
СУХОСТЬ И ОЩУЩЕНИЕ  
«ПЕСКА» В ГЛАЗАХ



УСТАЛОСТЬ ГЛАЗ ПРИ ДОЛГОМ  
НАПРЯЖЕНИИ, СНИЖЕНИЕ  
ЧЕТКОСТИ ВОСПРИЯТИЯ.



СТРЕССОВЫЕ СОСТОЯНИЯ,  
ГОЛОВНАЯ БОЛЬ И НАРУШЕНИЕ  
СНА, СВЯЗАННЫЕ С ПОВЫШЕННОЙ  
НАГРУЗКОЙ НА ЗРЕНИЕ



ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
В ОБЛАСТИ ГЛАЗ, МОРЩИНЫ,  
ТОНКИЕ ЛИНИИ



ПРОЯВЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ  
ОБЩЕЙ УСТАЛОСТИ


## ФУНКЦИИ МАССАЖЕРА



МАССАЖЕР ISEE 381 СОЧЕТАЕТ НЕСКОЛЬКО ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ОБЛАСТИ ГЛАЗ И ОБЩЕЙ РЕЛАКСАЦИИ: ПНЕВМОКОМПРЕССИОННЫЙ МАССАЖ, ВИБРАЦИОННЫЙ МАССАЖ И ПРОГРЕВ, ДОПОЛНЕННЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫМ СОПРОВОЖДЕНИЕМ.



Артикул 1301289

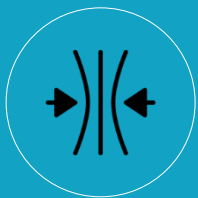

ПРЕССОМАССАЖ



ВИБРОМАССАЖ



МЯГКИЙ ПРОГРЕВ




АУДИО ТЕРАПИЯ

## ДЛЯ КОГО РЕКОМЕНДУЕТСЯ

УНИВЕРСАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО СОЗДАНО ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

МАССАЖЕР ISEE 381 МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ НЕ ЗАВИСИМО ОТ ВОЗРАСТА, ПРОФЕССИИ И ОБРАЗА ЖИЗНИ.

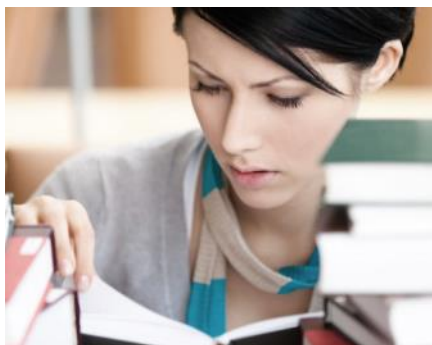

ДЛЯ ТЕХ, КТО МНОГО  
ЧИТАЕТ И ПИШЕТ,  
СМОТРИТ ТЕЛЕВИЗОР



ДЛЯ ТЕХ, КТО РАБОТЕТ ЗА  
КОМПЬЮТЕРОМ, ПОЛЬЗУЕТСЯ  
СМАРТФОНОМ ИЛИ ПЛАНШЕТОМ



ДЛЯ ТЕХ, КТО ВОДИТ АВТОМОБИЛЬ  
И ВЫПОЛНЯЕТ ВЫСОКОТОЧНУЮ  
РАБОТУ



Артикул 1301289



ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ  
ВЫСЫПАЕТСЯ И УСТАЕТ



ДЛЯ ОФИСНЫХ РАБОТНИКОВ И  
ВСЕХ, КТО РАБОТАЕТ С БОЛЬШИМ  
ОБЪЕМОМ ДОКУМЕНТОВ.



ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗАБОТИТСЯ О  
МОЛОДОСТИ ГЛАЗ

## ПНЕВМО-КОМПРЕССИОННЫЙ МАССАЖ



**МЕХАНИЧЕСКИЙ МАССАЖ** СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ, КОТОРЫЙ ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА ТКАНИ, ЧЕРЕДУЯ ПЕРИОДЫ ДАВЛЕНИЯ И РАССЛАБЛЕНИЯ. СТИМУЛИРУЕТ КРОВОТОК И УСИЛИВАЕТ ЛИМФОДРЕНАЖ, ПОМОГАЕТ УСТРАНИТЬ ОТЕКИ И ПРИПУХЛОСТЬ, УМЕНЬШИТЬ КРУГИ И ВЫВЕСТИ ТОКСИНЫ.


ПОМИМО ЭТОГО, **ПНЕВМОМАССАЖ** ВЛИЯЕТ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУ, УСТРАНЯЯ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАГРУЗОК И СТРЕССА. БЛАГОДАРЯ ВОЗДУШНОМУ МАССАЖУ ОЩУЩАЕТСЯ ЛЕГКОСТЬ, ОБЛЕГЧАЕТСЯ ЗАСЫПАНИЕ И СОКРАЩАЮТСЯ ГОЛОВНЫЕ БОЛИ.



СТИМУЛЯЦИЯ  
КРОВО-  
ОБРАЩЕНИЯ



АКТИВИЗАЦИЯ  
ЛИМФОДРЕНАЖА

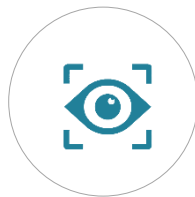

ЛУЧШЕНИЕ  
ЗРИТЕЛЬНЫХ  
ФУНКЦИЙ



ПОВЫШЕНИЕ  
ТОНУСА  
КОЖИ



КОРРЕКЦИЯ  
МОРЩИН И ТОНКИХ  
ЛИНИЙ



УСТРАНЕНИЕ  
СПАЗМОВ  
МЫШЦ



УМЕНЬШЕНИЕ  
ГОЛОВНОЙ  
БОЛИ



ОБЩЕЕ  
РЕЛАКСИРУЮЩЕЕ  
ДЕЙСТВИЕ

## ВИБРАЦИОННЫЙ МАССАЖ



**ВИБРАЦИЯ** ИМИТИРУЕТ ПРИЕМЫ МАНУАЛЬНОГО И ТОЧЕЧНОГО МАССАЖА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРОБЛЕМЫ ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АКТИВНЫЕ ТОЧКИ В ОБЛАСТИ ГЛАЗА ПОМОГАЕТ НОРМАЛИЗОВАТЬ ФУНКЦИИ СЛЕЗНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, УСТРАНИТЬ СУХОСТЬ И УСТАЛОСТЬ ГЛАЗ, ВОССТАНОВИТЬ ЧЕТКОСТЬ ЗРЕНИЯ И ПРЕДОТВРАТИТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ.

ЗА СЧЕТ УСТРАНЕНИЯ СПАЗМА МЫШЦ, ВИБРОМАССАЖ СПОСОБСТВУЕТ СОКРАЩЕНИЮ МОРЩИН И ВОССТАНАВЛИВАЕТ ДВИГАТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ МИМИЧЕСКОЙ МУСКУЛАТУРЫ.



СТИМУЛЯЦИЯ  
КРОВО-  
ОБРАЩЕНИЯ



АКТИВИЗАЦИЯ  
ЛИМФОДРЕНАЖА  
И ДЕТОКСИКАЦИЯ



ПОВЫШЕНИЕ  
ОКСИГЕНАЦИИ



ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
ЧЕТКОСТИ  
ЗРЕНИЯ



УСТРАНЕНИЕ  
СПАЗМОВ  
МЫШЦ



УСТРАНЕНИЕ  
ДИСКОМФОРТА,  
СУХОСТИ, УСТАЛОСТИ



КОРРЕКЦИЯ  
МОРЩИН И ТОНКИХ  
ЛИНИЙ



УМЕНЬШЕНИЕ  
ГОЛОВНОЙ  
БОЛИ

## МЯГКИЙ ПРОГРЕВ И АУДИОТЕРАПИЯ



ПРОГРЕВ ТКАНЕЙ В ДИАПАЗОНЕ 38 – 43  
ГРАДУСА

УЛУЧШАЕТ ЗАМЕДЛЕННОЕ  
КРОВООБРАЩЕНИЕ И СПОСОБСТВУЕТ  
УСТРАНЕНИЮ ЗАСТОЯ, УСТРАНЯЕТ  
СПАЗМЫ МЫШЦ И БЛАГОПРИЯТСТВУЕТ  
ПОЛНОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ И  
ФИЗИЧЕСКОЙ РЕЛАКСАЦИИ, УСИЛИВАЯ  
ДЕЙСТВИЕ ВИБРО И ПНЕВМОМАССАЖА.



РЕЛАКСИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ 15 –  
МИНУТНОГО СЕАНСА МАССАЖА МОЖНО  
ДОПОЛНИТЬ ПРЯТНОЙ МУЗЫКОЙ,  
КОТОРАЯ ПОМОЖЕТ ОТРЕШИТЬСЯ ОТ  
ПРОБЛЕМ И ЗАБОТ.

МАССАЖЕР ISEE 381 ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ  
МОЖЕТ ВОСПРОИЗВОДИТЬ ЛЮБИМЫЕ  
МЕЛОДИИ, ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ  
ПОЗВОЛЯЮТ ЗАГРУЗИТЬ 128 МБ  
МУЗЫКАЛЬНЫХ ФАЙЛОВ В ФОРМАТЕ mp3



## ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

МАССАЖ С ISEE 381 БЕЗОПАСЕН И НЕ ВЫЗЫВАЕТ ПРИВЫКАНИЯ, 15 МИНУТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДАДУТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТДОХНУТЬ НЕ ТОЛЬКО ГЛАЗАМ, НО И ВСЕМУ ТЕЛУ.



Артикул 1301289

5

5 РЕЖИМОВ  
ВОЗДЕЙСТВИЯ



РАБОТАЕТ  
ОТ АККУМУЛЯТОРА



УПРАВЛЕНИЕ  
ДВУМЯ КНОПКАМИ



СУМОЧКА  
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ



УДОБНО  
БРАТЬ С СОБОЙ

- **УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ:** МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ, КАК ЖЕНЩИНАМИ, ТАК И МУЖЧИНАМИ.
- **РАЗУМНАЯ ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ.** СТОИМОСТЬ МАССАЖЕРА, КОТОРЫЙ ПРОСЛУЖИТ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ, РАВНА СТОИМОСТИ ДВУХ ФЛАКОНОВ КОНСИЛЕРА ДЛЯ МАСКИРОВКИ СИНЯКОВ И ДЕШЕВЛЕ ОДНОГО ПОХОДА В САЛОН.
- **МАКСИМАЛЬНОЕ УДОБСТВО:** БЕСПРОВОДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПОЗВОЛЯЮТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАССАЖЕР БЕЗ ПРИВЯЗКИ К ЭЛЕКТРО-РОЗЕТКЕ.
- **КОМФОРТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ** ДОМА, В ОФИСЕ И В ПОЕЗДКАХ. МАССАЖЕР ЛЕГКО СКЛАДЫВАЕТСЯ.
- СМАРТ ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧАЕТ ПРИБОР ПО ОКОНЧАНИИ СЕАНСА МАССАЖА
- **ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ:** ПРОЦЕДУРА ЗАНИМАЕТ ВСЕГО 15 МИНУТ.
- **ПЯТЬ РЕЖИМОВ** С РАЗНОЙ КОМБИНАЦИЕЙ МЕТОДОВ ПОЗВОЛЯТ ПОДОБРАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЕ, ПОДХОДЯЩЕЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
- **ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** НЕ ТРЕБУЕТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ.



## ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

**ПЯТЬ РЕЖИМОВ** для проведения массажа способствуют устранению последствий повышенной нагрузки на глаза, а релаксирующая музыка окутывает негой и комфортом.



### ДЫШАЩИЙ ВНУТРЕННИЙ МАТЕРИАЛ

ВНУТРЕННЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ МЯГКОЙ, ДЫШАЩЕЙ ТКАНИ НЕ РАЗДРАЖАЕТ КОЖУ И СОЗДАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОЩУЩЕНИЕ КОМФОРТА.

### РЕГУЛИРУЕМАЯ ЗАСТЕЖКА

УСТРОЙСТВО НАДЕЖНО ФИКСИРУЕТСЯ НА ГОЛОВЕ БЛАГОДАРЯ РЕГУЛИРУЕМОЙ ЗАСТЕЖКЕ И НЕ СПОЛЗАЕТ ВО ВРЕМЯ МАССАЖА. БЛАГОДАРЯ РЕГУЛИРОВКЕ, МАССАЖЕР ПОДОЙДЕТ НА ЛЮБОЙ РАЗМЕР ГОЛОВЫ.



### ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

ПОЛНОГО ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА ХВАТАЕТ НА 4-5 ДНЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАССАЖЕРА. USB-КАБЕЛЬ для зарядки в комплекте.

### УДОБНО БРАТЬ С СОБОЙ

ISEE 381 СКЛАДЫВАЕТСЯ, ЕГО УДОБНО ХРАНИТЬ И БРАТЬ С СОБОЙ В ПОЕЗДКИ, ОН НЕ ЗАНИМАЕТ МНОГО МЕСТА И ВЕСИТ ОКОЛО 290 ГРАММ.



## ВНЕШНИЙ ВИД МАССАЖЕРА

Артикул 1301289




ЭЛАСТИЧНАЯ ЗАСТЕЖКА -  
ФИКСАТОР

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ  
ИЗ МЯГКОГО МАТЕРИАЛА

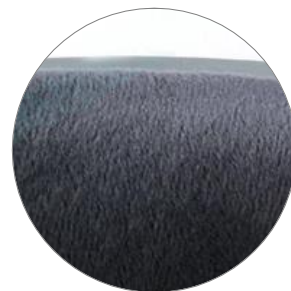

### ФУНКЦИИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

ПНЕВМОМАССАЖ

МЯГКИЙ ПРОГРЕВ

ВИБРОМАССАЖ

КНОПКА  
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ /  
ПОСТАНОВКИ НА ПАУЗУ  
МУЗЫКИ

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ /  
ВЫКЛЮЧЕНИЯ /  
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ  
РЕЖИМОВ



РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ  
МУЗЫКИ

РЕЖИМ ПАУЗА ДЛЯ  
МУЗЫКАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

ИНДИКАТОР ЗАРЯДКИ  
АККУМУЛЯТОРА

## КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ



1

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕОБХОДИМО СНЯТЬ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ. ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОВОДИТЬ ПРОЦЕДУРУ БЕЗ ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКИ.



2

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАРЯДИТЕ АККУМУЛЯТОР. ВКЛЮЧИТЕ МАССАЖЕР И НАЖАТИЕМ НА КНОПКУ ВЫБЕРИТЕ ОДИН ИЗ 5 РЕЖИМОВ. ВЫБЕРИТЕ МЕЛОДИЮ КНОПКОЙ УПРАВЛЕНИЯ МУЗЫКОЙ, ЗАФИКСИРУЙТЕ УСТРОЙСТВО И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ МАССАЖЕМ.



3

ВРЕМЯ МАССАЖНОГО СЕАНСА 15 МИНУТ, ПОСЛЕ ЧЕГО АППАРАТ АВТОМАТИЧЕСКИ ВЫКЛЮЧИТСЯ. ПРИ ЖЕЛАНИИ НАНЕСИТЕ КРЕМ ИЛИ ПАТЧИ ПОД ГЛАЗА.

## РЕЗУЛЬТАТЫ\*



ОБИЛИЕ СМАРТФОНОВ, СВЕТОВЫХ РЕКЛАМНЫХ ПАНЕЛЕЙ, ЯРКИЙ СВЕТ В ОФИСЕ И МЕРЦАНИЕ МОНИТОРОВ, ПОЕЗДКИ ЗА РУЛЕМ И ТЕЛЕВИЗОР, - ВСЁ ПРИНОСИТ НЕПОПРАВИМЫЙ ВРЕД ГЛАЗАМ. МАССАЖЕР ISEE 381 GEZATONE – УСТРОЙСТВО «MUST HAVE» ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН, ЕГО ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ОЩУЩАЕТСЯ УЖЕ ПОСЛЕ 1 СЕАНСА. ПРИ РЕГУЛЯРНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАССАЖЕР GEZATONE ПОМОЖЕТ СПРАВИТЬСЯ СО СТРЕССОВЫМИ СОСТОЯНИЯМИ И БЕССОННИЦЕЙ.



УМЕНЬШЕНИЕ  
КРАСНОТЫ И ЧУВСТВА  
ПЕСКА В ГЛАЗАХ



УМЕНЬШЕНИЕ  
ВЫРАЖЕННОСТИ  
МОРЩИН



ВОССТАНОВЛЕНИЕ И  
УЛУЧШЕНИЕ  
ЗРИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ



СНИЖЕНИЕ  
НАПРЯЖЕНИЯ ГЛАЗ  
ПОСЛЕ НАГРУЗОК



СОКРАЩЕНИЕ ТЕМНЫХ  
КРУГОВ, ОТЕКОВ И  
ПРИПУХЛОСТИ



ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
КОМФОРТНЫХ  
ОЩУЩЕНИЙ



СОКРАЩЕНИЕ  
ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ



УЛУЧШЕНИЕ  
ОБЩЕГО  
САМОЧУВСТВИЯ



УЛУЧШЕНИЕ СНА  
И СОКРАЩЕНИЕ  
СТРЕССА

\* Результаты зависят от исходного состояния здоровья и возраста могут быть достигнуты только при регулярном использовании.

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



- ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ
- ЛИМФАДЕНИТ. ГБ, СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ПАТОЛОГИИ, ГИПОТОНΙΑ.
- ГЛАУКОМА, ОСТРЫЕ И ХРОНИЧЕСКИЕ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, КАТАРАКТА, ПОВЫШЕНИЕ ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ, ОТСЛОЕНИЕ СЕТЧАТКИ.
- НАРУШЕНИЕ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ.
- НАРУШЕНИЕ СВЕРТЫВАЕМОСТИ КРОВИ, А ТАКЖЕ ПРИЕМ ПРЕПАРАТОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА КОАГУЛЯЦИЮ.
- ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ, РАЗДРАЖЕНИЕ НА ВЕКАХ И В ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИБОРА.
- ОСТРЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ, ХРОНИЧЕСКИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ПРОЦЕССЫ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ. ТУБЕРКУЛЁЗ.
- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- ПРОСТУДНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ГРИПП, ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА.


НЕ РЕКОМЕНДОВАНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА ЛИЦАМИ ДО 18 ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАССАЖЕРА ПРИ ТРАВМАХ, НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПОСЛЕ КОНСУЛЬТАЦИИ С ВРАЧОМ.**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА  
4 ЧАСА

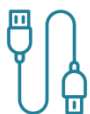

ПРОВОД ДЛЯ ЗАРЯДКИ  
В КОМПЛЕКТЕ



ИНСТРУКЦИЯ ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ



СУМОЧКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И  
ТРАНСПОРТИРОВКИ



Артикул 1301289



ПАРАМЕТРЫ АККУМУЛЯТОРА	3.7 V, 1200мА*ч
ПОРТ ЗАРЯДКИ	USB
ПАРАМЕТРЫ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА (в комплект не входит)	DC 5V, 1 A
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА	4 часа
ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ	4 - 5 дней
РАЗМЕР УПАКОВКИ	200 x165 x 100 мм

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Массажер для глаз Модель: iSee381 Gezatone – 1

USB-кабель – 1

Сумка для переноски и хранения – 1

Руководство по эксплуатации – 1

Упаковочная коробка – 1





сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



**GÉZATONE**



Москва 8 (495) 120-10-80  
регионы РФ: 8(800) 500-95-94  
(звонок бесплатный)



<http://www.sozv.ru/>



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>