

GÉZATONE

MASSAGE

— MAGIC

AMG714



ПРЕССОМАССАЖ

РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ

ГЛУБОКИЙ ПРОГРЕВ

МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ




РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ


ВОССТАНОВИТЬ ЛЕГКУЮ ПОХОДКУ, И ВЕРНУТЬ НОГАМ КОМФОРТ СПОСОБЕН ГРАМОТНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МАССАЖ, СОЧЕТАЮЩИЙ ПРИЕМЫ ДРЕНАЖА И РЕЛАКСАЦИИ. С ТАКОЙ ЗАДАЧЕЙ ОТЛИЧНО СПРАВЛЯЕТСЯ КОМПРЕССИОННЫЙ МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ «MAGIC GRAPHITE» AMG714, СОЗДАННЫЙ БРЕНДОМ GEZATONE ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ ЗАБОТЫ О НОГАХ.



ПОВЫШЕННАЯ НАГРУЗКА НА НОГИ,
УСТАЛОСТЬ В МЫШЦАХ НОГ ПРИ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ НЕПОДВИЖНОСТИ И РАБОТЕ СИДЯ
ТЯЖЕСТЬ И БОЛЕЗНЕННОСТЬ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ «БЕГОТНИ» ЗА ДЕНЬ

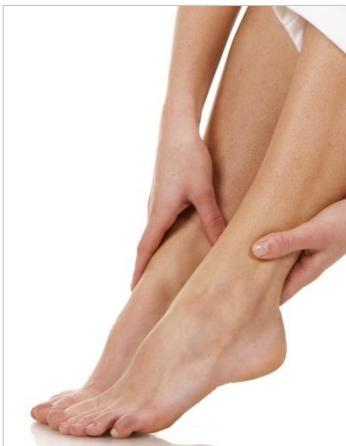

«ГИРИ НА НОГАХ» И ЧУВСТВО
ЛОМОТЫ ПРИ ДОЛГОМ
СТОЯНИИ.

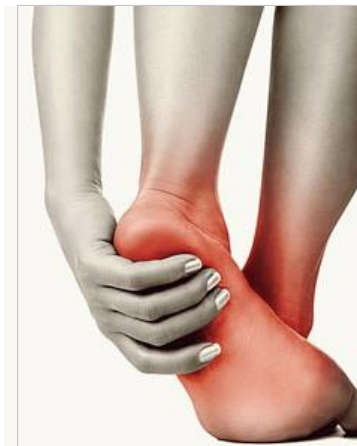

НАГРУЗКА НА МЫШЕЧНЫЙ
АППАРАТ И СВЯЗКИ ПРИ
УСИЛЕННЫХ ТРЕНИРОВКАХ И
СПОРТИВНЫХ ЗАНЯТИЯХ.



ОТЕЧНОСТЬ, НАРУШЕНИЕ
ДРЕНАЖА И ЦИРКУЛЯЦИИ,
ЗАСТОЙ ЖИДКОСТИ



ФУНКЦИИ

МАССАЖЕР ПОМОГАЕТ УСТРАНИТЬ ТЯЖЕСТЬ В ОБЛАСТИ СТОПЫ И ГОЛЕНИ, ВЫПОЛНЯЯ СЕАНСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТИМУЛИРУЮЩЕГО, ЛИМФОДРЕНАЖНОГО И РЕЛАКСИРУЮЩЕГО МАССАЖА.

ДЕЙСТВИЕ МАССАЖА ЭФФЕКТИВНО ДОПОЛНЯЕТ ФУНКЦИЯ ИК ПРОГРЕВА, КОТОРУЮ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО ЖЕЛАНИЮ, ОТКЛЮЧАЯ ИЛИ ВКЛЮЧАЯ КНОПКОЙ НА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ.

AMG714 СПРАВЛЯЕТСЯ С ОЩУЩЕНИЕМ УСТАЛОСТИ БЛАГОДАРЯ СТИМУЛИРУЮЩЕМУ ВЛИЯНИЮ НА БИОЛОГИЧЕСКИ-АКТИВНЫЕ ТОЧКИ СТОПЫ.

МАССАЖ УСТРАНЯЕТ СТРЕСС, ПОМОГАЕТ ВОССТАНОВИТЬСЯ ПОСЛЕ РАСТЯЖЕНИЙ И ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕРОЙ ПРОТИВ ВАРИКОЗА.




Артикул 1301294

3

РЕЖИМА
ВОЗДЕЙСТВИЯ



РОЛИКОВЫЙ
МАССАЖ

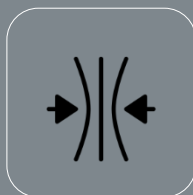

ПНЕВМО- КОМПРЕССИОННЫЙ
МАССАЖ



ИК ПРОГРЕВ




МАССАЖ ШИАЦУ



ДЛЯ КОГО РЕКОМЕНДУЕТСЯ

СЕАНС МАССАЖА СТОП В РАВНОЙ МЕРЕ ПОЛЕЗЕН, КАК ЖЕНЩИНАМ ТАК И МУЖЧИНАМ, ЧЬИ НОГИ УСТАЮТ, НЕ ЗАВИСИМО ОТ ВОЗРАСТА, ПРОФЕССИИ И ОБРАЗА ЖИЗНИ.

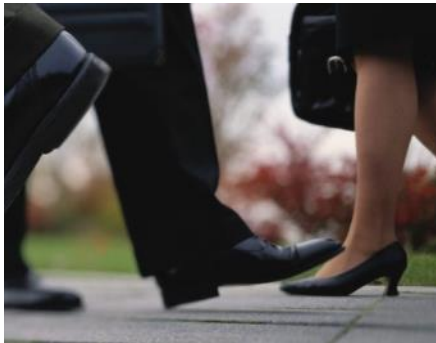

ДЛЯ ВСЕХ КТО
ИСПЫТЫВАЕТ НАГРУЗКИ
НА НОГИ И МНОГО ХОДИТ



ПРЕДСТАВИТЕЛИ «СТОЯЧИХ»
ПРОФЕССИЙ ИЗБАВЯТСЯ ОТ
БОЛЕЗНЕННОСТИ



ДЛЯ ТЕХ, КТО РЕГУЛЯРНО
НОСИТ ОБУВЬ НА ВЫСОКОМ
КАБЛУКЕ



Артикул 1301294



ДЛЯ ТЕХ, КТО В СТРЕССЕ И
УСТАЛ



ДЛЯ ТЕХ КТО МАЛО ДВИГАЕТСЯ И
ОЩУЩАЕТ УПАДОК СИЛ



ДЛЯ ТЕХ, КТО ИСПЫТЫВАЕТ БОЛЬШИЕ
ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ



МАССАЖ СТОП

ТРИ МЕТОДИКИ: ПНЕВМО-КОМПРЕССИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ, МАССАЖ РОЛИКАМИ И ГЛУБОКО ПРОНИКАЮЩЕЕ ТЕПЛО ПРОВОДЯТ ПОЛНЫЙ МАССАЖ СТОП, ИМИТИРУЯ ПРИЕМЫ МАНУАЛЬНЫХ МАССАЖНЫХ ТЕХНИК.



РЕЛАКСАЦИЯ СВОДА
СТОПЫ




МАССАЖ ШИАЦУ



ПООЧЕРЕДНЫЕ
СЖИМАНИЯ



ГЛУБОКАЯ
СТИМУЛЯЦИЯ

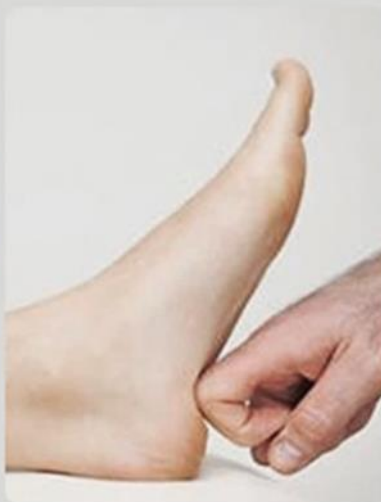

РАЗМИНАНИЕ И
ГЛУБОКАЯ
РЕЛАКСАЦИЯ



ДРЕНАЖ И
УСТРАНЕНИЕ ОТЕКОВ



ПНЕВМО-КОМПРЕССИОННЫЙ МАССАЖ



МЕХАНИЧЕСКИЙ МАССАЖ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ, КОТОРЫЙ ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА ТКАНИ, ЧЕРЕДУЯ ПЕРИОДЫ ДАВЛЕНИЯ И РАССЛАБЛЕНИЯ.

СТИМУЛИРУЕТ КРОВОТОК И УСИЛИВАЕТ ЛИМФОДРЕНАЖ, ПОМОГАЕТ УСТРАНИТЬ ОТЕКИ И ТЯЖЕСТЬ В НОГАХ.

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА, ПОСТУПАЮЩЕГО В СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАМЕРЫ МАССАЖЕРА. ВОЗДУШНЫЕ ВОЛНЫ ОКАЗЫВАЮТ МЕХАНИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ НА ВСЮ ОБЛАСТЬ СТОПЫ.

Артикул 1301294

ЭФФЕКТЫ МАССАЖА



УСТРАНЕНИЕ
СПАЗМОВ МЫШЦ



УСТРАНЕНИЕ ЗАСТОЯ И
ОТЕЧНОСТИ



СТИМУЛЯЦИЯ
КРОВООБРАЩЕНИЯ



ОБЩЕЕ РЕЛАКСИРУЮЩЕЕ
ДЕЙСТВИЕ



РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ



МАССАЖНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
ВРАЩАЮЩИМИСЯ РОЛИКАМИ
СТИМУЛИРУЕТ НЕ ТОЛЬКО
КРОВООБРАЩЕНИЕ И ДРЕНАЖ, ЭТОТ МЕТОД
ПОЗВОЛЯЕТ ПРОРАБОТАТЬ БИОЛОГИЧЕСКИ-
АКТИВНЫЕ ТОЧКИ И СТИМУЛИРОВАТЬ
РЕФЛЕКСОГЕННЫЕ ЗОНЫ СТОПЫ.
БЛАГОДАРЯ РОЛИКОВОЙ СТИМУЛЯЦИИ,
МАССАЖЕР РАБОТАЕТ В ТЕХНИКЕ ШИАЦУ,
ВЛИЯЯ НА ВСЕ ТЕЛО.

РОЛИКИ АККУРАТНО ВОЗДЕЙСТВУЮТ НА
ОБЛАСТЬ АХИЛЛОВА СУХОЖИЛИЯ,
СОХРАНЯЯ ЭЛАСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И
ПОВЫШАЯ СТОЙКОСТЬ К НАГРУЗКАМ.

Артикул 1301294

ЭФФЕКТЫ МАССАЖА



УСТРАНЕНИЕ
СПАЗМОВ МЫШЦ



УСТРАНЕНИЕ ЗАСТОЯ И
ОТЕЧНОСТИ



СТИМУЛЯЦИЯ
КРОВООБРАЩЕНИЯ



ПРОРАБОТКА
БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫХ ТОЧЕК СТОПЫ



ГЛУБОКИЙ ПРОГРЕВ



ПОД ВЛИЯНИЕМ ТЕПЛА МЫШЦЫ РАССЛАБЛЯЮТСЯ И ЛУЧШЕ ВОСПРИНИМАЮТ МАССАЖ, СЕАНСЫ ПРОХОДЯТ БЕЗБОЛЕЗНЕННО И КОМФОРТНО.

ТЕПЛО ОКАЗЫВАЕТ СТИМУЛИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ НА КРОВООБРАЩЕНИЕ И ЛИМФОДРЕНАЖ, А ТАКЖЕ ПОВЫШАЕТ ЭЛАСТИЧНОСТЬ СВЯЗОК, ПОДГОТАВЛИВАЯ МЫШЦЫ К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ.

ОБЩЕ-РЕЛАКСИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ТЕПЛА ПРОГОНЯЕТ ТРЕВОГИ И ВОЛНЕНИЯ, ПОМОГАЯ РАССЛАБИТЬСЯ И ПОЛУЧИТЬ ПОЛНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ПРОЦЕДУРЫ МАССАЖА.

Артикул 1301294

ОКАЗЫВАЕТ АНТИСПАСТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ, УЛУЧШАЕТ ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ ОРГАНИЗМА ТОКСИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ ОБМЕНА



УСТРАНЕНИЕ
СПАЗМОВ МЫШЦ



УСТРАНЕНИЕ
БОЛЕЗНЕННОСТИ И
ЛОМОТЫ



СТИМУЛЯЦИЯ
КРОВООБРАЩЕНИЯ И
ДРЕНАЖА



ОБЩЕЕ РЕЛАКСИРУЮЩЕЕ
ДЕЙСТВИЕ



РЕЖИМЫ РАБОТЫ

В ПРОГРАММУ УСТРОЙСТВА ВКЛЮЧЕНЫ 3 РЕЖИМА, ПАРАМЕТРЫ КОТОРЫХ МОЖНО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ПО ЖЕЛАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, КАК И ВРЕМЯ СЕАНСА МАССАЖА.



Артикул 1301294

1

ПЕРВЫЙ РЕЖИМ



КОМБИНИРУЮТСЯ ВСЕ ВАРИАНТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ, РАБОТАЮТ И РОЛИКИ И МАССАЖНАЯ ПЛАТФОРМА ПОД СТОПОЙ. ФУНКЦИЯ ГЛУБОКО ПРОНИКАЮЩЕГО ТЕПЛА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПО НЕОБХОДИМОСТИ, ЕЁ МОЖНО ВЫКЛЮЧИТЬ.

2

ВТОРОЙ РЕЖИМ



КОМБИНИРУЮТСЯ ВСЕ ВАРИАНТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ, НО МЕНЯЕТСЯ НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ РОЛИКОВ И МАССАЖНЫЕ ДВИЖЕНИЯ.

ГЛУБОКИМ ПРОГРЕВОМ МОЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИ ЖЕЛАНИИ.

3

ТРЕТИЙ РЕЖИМ



ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО ПРЕССОМАССАЖ, КОТОРЫЙ ГЛУБОКО РАССЛАБЛЯЕТ МЫШЦЫ СТОПЫ И ИЗБАВЛЯЕТ ОТ ОТЕЧНОСТИ.



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



- **УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ:** МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ, КАК ЖЕНЩИНАМИ, ТАК И МУЖЧИНАМИ, КАК МОЛОДЫМИ, ТАК И ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ.
- **КОМФОРТНОЕ** ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОМА, В ОФИСЕ
- ВЫ САМИ ВЫБИРАЕТЕ **ДЛИТЕЛЬНОСТЬ МАССАЖА**, РЕГУЛИРУЯ ИНТЕРВАЛ 15 – 30 МИНУТ.
- ПРИБОР ИМЕЕТ **3 РЕЖИМА** И 3 ВАРИАНТА СИЛЫ ПРЕССО-МАССАЖА, БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ ИНТЕНСИВНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ РЕГУЛИРУЕТСЯ УРОВНЕМ КОМФОРТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
- **ПРОСТАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ** ПОМОЖЕТ ВЫБРАТЬ НУЖНЫЙ РЕЖИМ БЕЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ.

Артикул 1301294

- ЭТОТ ЛИЧНЫЙ МАССАЖИСТ ВСЕГДА ГОТОВ К РАБОТЕ, К НЕМУ НЕ НУЖНО ЗАПИСЫВАТЬСЯ НА ПРИЕМ. КОГДА НОГИ УСТАНУТ, ОН ВЕРНЕТ ЛЕГКОСТЬ ВАШЕЙ ПОХОДКЕ.



ДЛЯ ЖЕНЩИН
И МУЖЧИН



ТРИ ВИДА
ВОЗДЕЙСТВИЯ



СЕАНС МАССАЖА
15 – 30 МИНУТ



3 МАССАЖНЫЕ
ПРОГРАММЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

РЕЛАКСИРУЮЩИЙ МАССАЖ ПОМОЖЕТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ УСТАЛОСТИ И ТЯЖЕСТИ В НОГАХ, СОЧЕТАНИЕ МАССАЖА С ГЛУБОКО ПРОНИКАЮЩИМ ТЕПЛОМ ДЕЛАЕТ МАССАЖЕР ЭФФЕКТИВНЫМ СРЕДСТВОМ ДЛЯ СНЯТИЯ ОБЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ.



УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РЕГУЛИРОВАТЬ ПАРАМЕТРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ МОЖНО НА РАБОЧЕЙ ПАНЕЛИ МАССАЖЕРА.



ВСЕГДА ТЕПЛЫЕ НОГИ

БЛАГОДАРЯ ФУНКЦИИ ИНФРАКРАСНОГО ПРОГРЕВА ВСЕГДА КОМФОРТНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ И ТЕПЛЫЕ НОГИ.

ГИГИЕНИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

ЧЕХЛЫ МАССАЖЕРА, ВЫПОЛНЕННЫЕ ИЗ ПРОЧНОГО МАТЕРИАЛА, ЛЕГКО СНИМАЮТСЯ, ИХ МОЖНО СТИРАТЬ И ДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ.



ТИХАЯ РАБОТА

MAGIC GRAPHITE НЕ ТРЕВОЖИТ СВОЕЙ РАБОТОЙ ОКРУЖАЮЩИХ, НАСЛАЖДАЙТЕСЬ МАССАЖЕМ ВО ВРЕМЯ ВЕЧЕРНЕГО ОТДЫХА ПЕРЕД ЭКРАНОМ ТЕЛЕВИЗОРА ИЛИ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕРЫВА В ОФИСЕ.





ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА



ИНДИКАТОР ВРЕМЕНИ

КНОПКА ВЫБОРА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
ПРОЦЕДУРЫ

КНОПКА ВЫБОРА РЕЖИМА

КНОПКА ВЫБОРА ИНТЕНСИВНОСТИ


КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ИК ПРОГРЕВА

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ / ВЫКЛЮЧЕНИЯ
МАССАЖЕРА

Артикул 1301294

СНИЗУ

УДОБНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ФИКСАЦИИ СЕТЕВОГО ШНУРА.

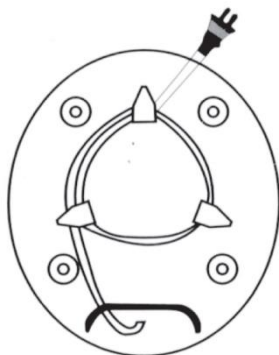

СЪЕМНЫЕ
ЧЕХЛЫ



РЕЗУЛЬТАТЫ



ДАЖЕ ПОСЛЕ 15 МИНУТ МАССАЖА ЧУВСТВУЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НЕ ТОЛЬКО НА СТОПЫ, НО И НА ВСЕ ТЕЛО. НОГИ ПЕРЕСТАЮТ ГУДЕТЬ, ПОЯВЛЯЕТСЯ ЧУВСТВО ЛЕГКОСТИ. ЗА СЧЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ ЧУВСТВУЕТСЯ ТЕПЛО, УХОДИТ ОНЕМЕНИЕ И СКОВАННОСТЬ. МОЖНО ПОЙТИ КУДА УГОДНО, ОТЕКШИЕ СТОПЫ МОЖНО ЗАПИХНУТЬ В ЛЮБИМЫЕ ТУФЛИ, ВЕДЬ ОТЕКИ СОКРАТИЛИСЬ.



ВОССТАНОВЛЕНИЕ
КРОВООБРАЩЕНИЯ



УМЕНЬШЕНИЕ
ТЯЖЕСТИ И
ЛОМОТЫ В НОГАХ



СОКРАЩЕНИЕ
ОТЕЧНОСТИ



ПРОФИЛАКТИКА
ВАРИКОЗА



УСТРАНЕНИЕ
СКОВАННОСТИ
В МЫШЦАХ



ЛЕГКОСТЬ
В НОГАХ



СОКРАЩЕНИЕ
БОЛЕЗНЕННЫХ
ОЩУЩЕНИЙ В
МЫШЦАХ



УЛУЧШЕНИЕ
ОБЩЕГО
САМОЧУВСТВИЯ



ОБЩИЙ РЕЛАКС,
УСТРАНЕНИЕ
СТРЕССА

** Результаты зависят от исходного состояния здоровья и возраста могут быть достигнуты только при регулярном использовании.*



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИБОР ПОСЛЕ ПРИЕМА СЕДАТИВНЫХ, ОБЕЗБОЛИВАЮЩИХ И СНОТВОРНЫХ ПРЕПАРАТОВ, А ТАКЖЕ АЛКОГОЛЯ



- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- САХАРНЫЙ ДИАБЕТ, ЭПИЛЕПСИЯ, РЕВМАТИЗМ.
- ИМПЛАНТЫ, ШТИФТЫ И ИСКУССТВЕННЫЕ ЧАСТИ НОГ И СТОПЫ.
- НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ МАССАЖЕР ПРИ НЕСРОСШИХСЯ ПЕРЕЛОМАХ, ПОВРЕЖДЕНИЯХ СВЯЗОК И СУХОЖИЛИЙ.
- ХРОНИЧЕСКИЕ ПАТОЛОГИИ ПОЧЕК И ПЕЧЕНИ
- ПОДАГРА
- НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ
- НАЛИЧИЕ СВЕЖИХ МОЗОЛЕЙ И ССАДИН, ДЕРМАТИТОВ, ДЕРМАТОЗОВ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ.
- ОСТЕОМИЕЛИТ, КОСТНАЯ ФОРМА ТУБЕРКУЛЕЗА
- НАРУШЕНИЕ СВЕРТЫВАЕМОСТИ КРОВИ, ЗАБОЛЕВАНИЯ СОСУДОВ
- СОСУДИСТЫЕ ПАТОЛОГИИ: ВАРИКОЗ, ОБЛИТЕРИРУЮЩИЙ ЭНДАРТЕРИИТ, ТРОМБОЗЫ, АРТЕРИОСКЛЕРОЗ
- СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ, ГИПЕРТЕНЗИЯ
- ОСТРЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
- ХРОНИЧЕСКИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ
- ГРИПП, ОРВИ, ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА
- БЕРЕМЕННОСТЬ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ



Артикул 1301294

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ:	АС 220-240 В., 50 Гц
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ:	не более 50 Вт
ТАЙМЕР АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ:	5 - 30 минут
ГАБАРИТЫ:	440 x 380 x 243 мм
ВЕС:	5 кг
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ:	15-85°С
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР:	от +10°С до +40°С при влажности от 0 до 65%

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Массажер для ног Gezatone «Massage Magic Graphite»
модель AMG714 – 1 шт.

Инструкция по эксплуатации – 1 шт.



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ




сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



GÉZATONE

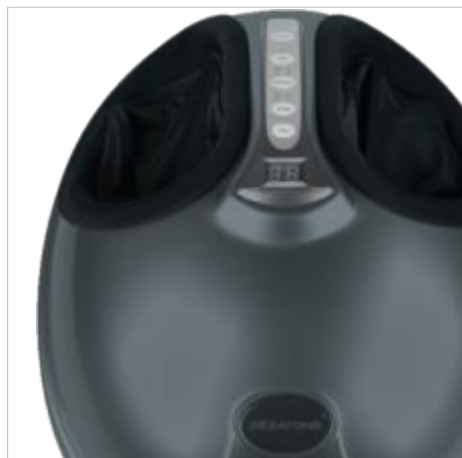

Москва 8 (495) 120-10-80
регионы РФ: 8(800) 500-95-94
(звонок бесплатный)



<http://www.sozv.ru/>



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>