

Анализатор паров этанола в
выдыхаемом воздухе Alcotest 6510

Руководство по эксплуатации



СОДЕРЖАНИЕ

1	ОПИСАНИЕ И РАБОТА	3
1.1	Назначение	3
1.2	Технические характеристики	4
1.3	Состав изделия	7
1.4	Устройство и работа	9
1.5	Маркировка и пломбирование	11
1.6	Упаковка	12
2	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	12
2.1	Эксплуатационные ограничения	12
2.2	Подготовка к работе	12
2.3	Порядок работы	15
3	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	21
4	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	26
5	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	28

Перед началом работы с анализатором паров этанола в выдыхаемом воздухе Alcotest 6510 (далее – анализатор), пожалуйста, прочтите и следуйте указаниям настоящего руководства по эксплуатации.

В руководстве по эксплуатации содержится полная информация о принципах функционирования, правилах эксплуатации, возможностях и технических характеристиках, периодичности и объеме технического обслуживания анализатора.

Анализатор должен использоваться только для указанных ниже целей.

Изготовитель: фирма «Dräger Safety AG & Co. KGaA», Германия.

Поставщик: ООО «СИМС-2», 125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6, тел./факс: (495) 792-31-90.

Анализатор зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития под названием «Прибор для обнаружения алкоголя в крови по выдыхаемому воздуху Алкотест (Alcotest) 6510 с принадлежностями», регистрационное удостоверение № ФСЗ 2004/1646 от 24 декабря 2004 г.

Тип анализаторов паров этанола выдыхаемом воздухе Alcotest 6510 внесен в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, регистрационный номер 29815-13, свидетельство об утверждении типа средств измерений DE.C.39.001.A № 51588 , действительно до 23.07.2018 г.

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1.1 Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе Alcotest 6510 предназначен для экспрессного измерения массовой концентрации паров этанола в отобранной пробе выдыхаемого воздуха.

1.1.2 Анализатор является портативным автоматическим прибором циклического действия.

1.1.3 Рабочие условия эксплуатации:

- диапазон температуры окружающего воздуха, °С: от минус 5 до 50;
- диапазон относительной влажности окружающего воздуха, %: от 10 до 100 (без конденсации);
- диапазон атмосферного давления, кПа: от 84,0 до 106,7.

1.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.2.1 Диапазон измерений и пределы допускаемой погрешности анализаторов при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С приведены в таблице 1.

Таблица 1

Диапазон измерений массовой концентрации этанола, мг/л	Пределы допускаемой погрешности при температуре (20 ± 5) °С	
	абсолютной	относительной
0 – 0,50	$\pm 0,05$ мг/л	-
св. 0,50 – 2,00	-	± 10 %

Примечания:

- 1) В анализаторах программным способом установлен минимальный интервал показаний, которые выводятся на дисплей анализатора и бумажный носитель в виде нулевых показаний: от 0,00 до 0,02 мг/л.
- 2) На дисплее единицы измерений массовой концентрации этанола «мг/л» отображаются в виде «mg/l».

Примечание: При показаниях анализатора, превышающих верхний предел измерений 2,00 мг/л, массовая концентрация этанола в выдыхаемом воздухе с учетом пределов допускаемой погрешности составляет не менее 1,80 мг/л.

1.2.2 Диапазон показаний, мг/л: от 0,00 до 2,50.

1.2.3 Цена младшего разряда шкалы, мг/л: 0,01.

1.2.4 Пределы допускаемой погрешности анализаторов в зависимости от температуры окружающего воздуха приведены в таблице 2.

Таблица 2

Температура окружающего воздуха	Диапазон измерений массовой концентрации этанола, мг/л	Пределы допускаемой погрешности ¹⁾	
		абсолютной	относительной
от минус 5,0 °С до 5,0 °С вкл.	0 – 0,25	± 0,05 мг/л	–
	св.0,25 – 2,00	–	± 20 %
св. 5,0 °С до 15,0 °С вкл.	0 – 0,33	± 0,05 мг/л	–
	св. 0,33 – 2,00	–	± 15 %
св.15,0 °С до 25,0 °С вкл.	0 – 0,50	± 0,05 мг/л ²⁾	–
	св. 0,50 – 2,00	–	± 10 % ²⁾
св.25,0 °С до 35,0 °С вкл.	0 – 0,33	± 0,05 мг/л	–
	св. 0,33 – 2,00	–	± 15 %
св.35,0 °С до 50,0 °С вкл.	0 – 0,25	± 0,05 мг/л	–
	св. 0,25 – 2,00	–	± 20 %

1) В таблице указаны пределы допускаемой погрешности анализаторов в рабочих условиях эксплуатации, приведенных в п. 1.1.3 настоящего руководства по эксплуатации.

2) Согласно таблице 1.

1.2.5 Дополнительные погрешности от наличия неизмеряемых компонентов в анализируемой газовой смеси приведены в таблице 3.

Таблица 3

Неизмеряемый компонент	Содержание неизмеряемого компонента в газовой смеси ¹⁾	Дополнительная погрешность ²⁾
Ацетон	не более 0,5 мг/л	отсутствует
Оксид углерода	не более 0,3 мг/л	отсутствует
Метан	не более 0,2 мг/л	отсутствует
Диоксид углерода	не более 10 % (об.)	отсутствует

1.2.6 Параметры анализируемой газовой смеси при подаче пробы на вход анализатора:

- расход анализируемой газовой смеси, л/мин: не менее 10;
- объем пробы анализируемой газовой смеси, л: не менее 1,2.

1.2.7 Время подготовки к работе после включения, с: не более 20;

(с выключенной функцией автоматического контроля отсутствия этанола в окружающем воздухе, с : не более 6).

1.2.8 Время измерения после отбора пробы, с: не более 30.

1.2.9 Время подготовки к работе после анализа газовой смеси с массовой концентрацией этанола 0,50 мг/л, с: не более 40.

1.2.10 Интервал времени работы анализаторов без корректировки показаний, месяцев: не менее 12.

Корректировка показаний анализаторов проводится при каждой поверке.

- 1.2.11 Электрическое питание анализаторов может осуществляться от двух сменных щелочных батарей питания типа AA (2x1,5 В) или двух перезаряжаемых NiMH аккумуляторов (2x1,2 В).
- 1.2.12 Число измерений без замены/заряда элементов питания: не менее 1500.
- 1.2.13 Габаритные размеры анализаторов, мм:
- длина не более 140;
 - ширина не более 80;
 - высота не более 35.
- 1.2.14 Масса анализаторов, г: не более 200.
- 1.2.15 Срок службы электрохимического датчика, установленного в анализаторах, лет: не менее 3.
- 1.2.16 Средний срок службы анализаторов, лет: 5.
- 1.2.17 Средняя наработка на отказ, ч: 8000.

1.3 Состав изделия

- 1.3.1 Конструктивно анализатор выполнен в виде моноблока. Внешний вид анализатора представлен на рисунке 1.



Рисунок 1 – Внешний вид анализатора.

На лицевой стороне анализатора расположены три кнопки управления и цифровой дисплей. На обратной стороне анализатора расположена крышка отсека для элементов питания.


1.3.2 Комплект поставки анализаторов приведен в таблице 4.

Таблица 4

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	Анализатор	1 шт.
2	Мундштук сменный ¹⁾	3 шт.
3	Элементы питания (щелочные батареи питания типа AA или перезаряжаемые NiMH аккумуляторы ²⁾)	2 шт.
4	Устройство для подзарядки аккумуляторов ²⁾	1 шт.
5	Блок питания для подзарядки аккумуляторов ²⁾	1 шт.
6	Ремень наручный	1 шт.
7	Футляр кожаный для анализатора ²⁾	1 шт.
8	Кейс	1 шт.
9	Руководство по эксплуатации	1 экз.
10	Методика поверки МП-242-1467-2013	1 экз.
11	Паспорт	1 экз.

1) При эксплуатации анализатора сменные мундштуки поставляются по отдельным заказам.
2) Комплектующие поставляются по отдельному заказу.

1.3.3 Внешний вид анализатора в кейсе представлен на рисунке 2.

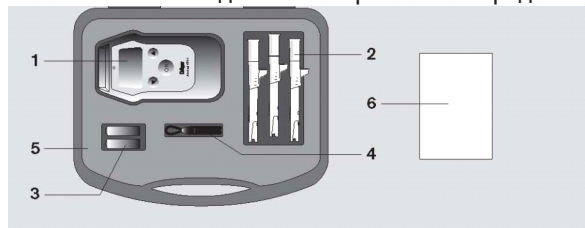

- 1 - Анализатор
- 2 - Мундштуки сменные, 3 штуки
- 3 - Элементы питания, 2 штуки

- 4 - Ремень наручный
- 5 - Кейс
- 6 - Документация

Рисунок 2 - Внешний вид анализатора в кейсе.

1.4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА


1.4.1 Анализатор представляет собой портативный электронный прибор, быстро и точно определяющий концентрацию паров этанола в выдыхаемом воздухе. Для удобства оператора сообщения обо всех этапах подготовки и проведения теста выводятся на полнотекстовый дисплей на русском языке и сопровождаются звуковыми сигналами.

Анализатор имеет двухуровневую систему меню.

Меню первого уровня (меню пользователя) предназначено для оператора и позволяет просмотреть результаты 10 последних измерений, сохраненных в памяти анализатора, дату последней корректировки показаний, а также откорректировать некоторые параметры (язык вывода информации на дисплей и контраст дисплея).

Меню второго уровня (сервисное меню) защищено PIN-кодом и обеспечивает расширенные возможности по изменению конфигурации и установок анализатора, а также доступ в режим корректировки показаний. Предназначено для специалистов сервисных центров и поверителей.


1.4.2 Внешний вид и описание основных элементов анализатора.

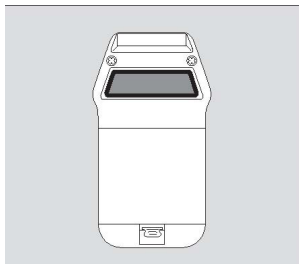

На обратной стороне анализатора предусмотрено место для наклейки "Краткой инструкции по эксплуатации".


После приобретения анализатора:

- Отделите наклейку от основания из фольги.
- Поместите наклейку на предназначенную область на обратной стороне корпуса.

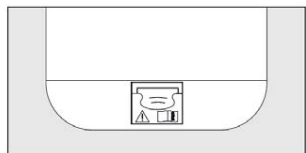

Символы под крышкой отсека для элементов питания означают:


Внимание! Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации! Перед зарядкой элементов питания, прочтите инструкцию!

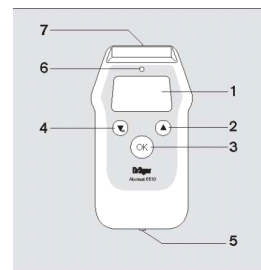

- 1 Дисплей
- 2 Кнопка меню "Вверх"
- 3 Кнопка "OK"
- 4 Кнопка меню "Вниз/меню"
- 5 Разъем
- 6 Красный/зеленый/желтый индикатор
- 7 Держатель для мундштука

1.4.3 В рабочем режиме на дисплей выводится результат измерения, а также информация о текущих процессах, а при входе в меню анализатора – высвечиваются соответствующие разделы меню. Дисплей подсвечиваемый, контраст можно изменять через меню анализатора.

1.4.4 Кнопки  «ВНИЗ» и  «ВВЕРХ» используются для ввода значений и выбора функций меню.

1.4.5 Кнопка  подтверждает введенные параметры или выбранные функции, используется для включения, выключения анализатора и принудительного отбора пробы воздуха (в ручном режиме отбора пробы).

1.4.7 Трехцветный индикатор дополняет показания на дисплее.

1.4.8 В выемке держателя для мундштука расположен nipple со входным отверстием. Для дополнительного удобства конструкция анализатора предусматривает как левую, так и правую ориентацию мундштуков относительно лицевой панели.

1.4.9 Для выполнения выдоха в анализатор используются сменные одноразовые поштучно упакованные пластиковые мундштуки. При выполнении выдоха через мундштук анализатор автоматически контролирует длительность и расход воздуха в соответствии с заводскими установками. Проба воздуха для анализа отбирается в конце выдоха, что позволяет измерять содержание этанола в воздухе из глубины легких.

1.4.10 Анализатор имеет внутреннюю память, в которой сохраняются результаты 10 последних измерений с порядковым номером теста. Доступ к памяти осуществляется через меню пользователя.

1.4.11 Анализаторы имеют два режима отбора пробы воздуха – автоматический и ручной. Для отбора проб воздуха в автоматическом и ручном режиме используются сменные одноразовые пластиковые мундштуки, результаты измерений выводятся на дисплей в цифровом виде. Кроме того, анализатор позволяет выполнить отбор пробы воздуха в пассивном режиме, без использования мундштука, при этом выполняется оценка наличия этанола в воздухе и на дисплее выводятся сообщения «Алкоголь» или «Нет алкоголя».

1.4.12 Анализаторы имеют встроенное программное обеспечение: 8323425.

Встроенное системно-прикладное программное обеспечение анализаторов разработано изготовителем специально для решения задачи измерения массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе, а также отображения результатов измерений на дисплее и хранения измеренных данных.

Идентификация встроенного программного обеспечения производится в сервисном меню путем вывода версии на дисплей анализаторов.

Идентификационные данные встроенного программного обеспечения анализаторов приведены в таблице 5.




Таблица 5

Модели анализаторов	Наименование программного обеспечения	Идентификационное наименование программного обеспечения	Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения	Идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения
Alcotest модели 6510	Alcotest 6510 Russia	8323425	Rev. 2.59	3BFDh	CRC 16
П р и м е ч а н и е – Номер версии встроенного программного обеспечения анализаторов должен быть не ниже указанного в таблице.					

Влияние встроенного программного обеспечения на метрологические характеристики анализаторов учтено при их нормировании. Уровень защиты встроенного программного обеспечения анализаторов от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «С» по МИ 3286–2010.

1.5 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

1.5.1 На передней панели анализатора нанесено:

- 1) логотип фирмы-изготовителя «Dräger»,
- 2) наименование модели анализатора «Alcotest 6510»,
- 3) обозначение кнопок  «ВНИЗ»  «ВВЕРХ» и  «ОК».

1.5.2 На задней панели анализатора под крышкой отсека для элементов питания нанесено:

- 1) наименование модели анализатора «Alcotest 6510»,
- 2) логотип фирмы-изготовителя «Dräger»,
- 3) номер анализатора по заводской спецификации (P/N),
- 4) заводской номер анализатора (S/N),
- 5) страна производства,
- 6) наименование фирмы-изготовителя «Dräger Safety AG & Co. KGaA».

1.6 УПАКОВКА

1.6.1 Анализатор и комплектующие упаковываются в кейс.

1.6.2 Эксплуатационная документация упаковывается в пакет из полиэтиленовой пленки.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

2.1.1 Перед началом использования анализатора убедитесь, что условия эксплуатации удовлетворяют требованиям п. 1.1.3 настоящего Руководства по эксплуатации (РЭ).

2.1.2 Ремонт анализатора должен проводиться квалифицированными специалистами в сервисных центрах.

2.1.3 Для каждого обследуемого необходимо использовать новый одноразовый мундштук.

2.1.4 Не подвергайте датчик анализатора воздействию газовых смесей с высоким содержанием этанола, например, при полоскании полости рта алкоголем непосредственно перед измерением. Это сокращает срок службы датчика.

2.1.5 Не подносите анализатор близко к антеннам мобильных телефонов и передающих станций.




2.2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

2.2.1 Внешний осмотр анализатора:

- проверьте наличие пломбы (специальной наклейки на крепежном винте на задней панели анализаторов, при снятой крышке отсека для элементов питания) и исправность органов управления.
- убедитесь в отсутствии механических повреждений.

2.2.2 Перед использованием выдержите анализатор в условиях эксплуатации в течение 1 часа, если условия хранения не соответствовали рабочим условиям эксплуатации, указанным в п. 1.1.3 настоящего РЭ.

2.2.3 Установка элементов питания

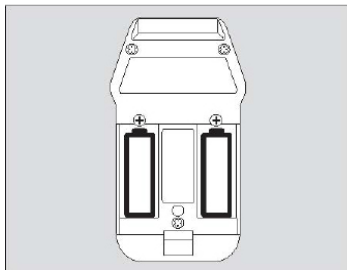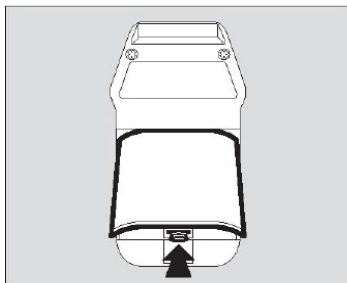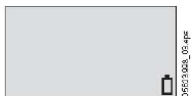

При подготовке к работе, или если на дисплей выводится символ разряженной батареи, в анализатор устанавливают две щелочные батареи питания типа АА (2 x 1,5 В) или два перезаряжаемых NiMH аккумулятора (2 x 1,2 В):

- Осторожно нажмите на фиксатор отсека для элементов питания и снимите крышку.
- Установите элементы питания, соблюдая правильную полярность, указанную на корпусе.
- Закройте крышку отсека для элементов питания.

Заряд NiMH аккумуляторов:

Для подзарядки NiMH аккумуляторов снимите их с анализатора и поместите в специальное зарядное устройство (приобретается отдельно). Следуйте указаниям по эксплуатации зарядного устройства.

2.2.4 Проверка заряда элементов питания

Состояние заряда элементов питания можно определить по символу батареи в нижнем правом углу дисплея. Анализатор имеет четыре уровня индикации заряда батареи:



Полная зарядка



2/3 от полной емкости батареи




1/3 от полной емкости батареи



Батарея разряжена – в этом случае замените щелочные батареи питания на новые или зарядите NiMH аккумуляторы согласно 2.2.3 настоящего РЭ.

2.2.5 Крепление наручного ремня

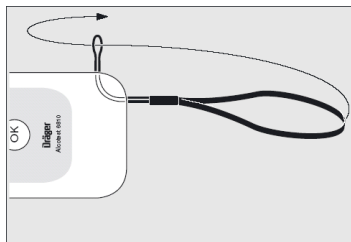

Чтобы исключить риск случайного падения анализатора, можно прикрепить ремень из комплекта поставки и при эксплуатации продевать через него запястье.

- Вставьте малую петлю в отверстие на корпусе.
- Проденьте длинную петлю через образовавшуюся петельку и затяните.



- Откройте упаковку. Из гигиенических соображений не снимайте упаковку с участка, контактирующего со ртом, пока мундштук не будет правильно установлен в анализатор.



- Направьте мундштук по диагонали (рифленной стороной вверх) по направляющему желобку до упора и вдавите мундштук в держатель. Щелчок подтвердит правильное зацепление.



- Полностью снимите упаковку.

Мундштук может быть ориентирован в правую или левую сторону.

2.3 ПОРЯДОК РАБОТЫ

2.3.1 Порядок работы при измерении массовой концентрации этанола в выдыхаемом воздухе (тест)

2.3.1.1 При выполнении теста соблюдайте следующие правила:

а) Анализируемая проба воздуха не должна содержать частиц табачного дыма, остатков алкоголя или медикаментозных спиртосодержащих препаратов из ротовой полости, а также мокрот и слюны.

Поэтому перед проведением теста:

- должно пройти не менее 2 минут после курения;
- должно пройти не менее 20 минут после употребления спиртных напитков, алкогольсодержащих лекарственных препаратов, спреев для ротовой полости, а также пищевых продуктов, содержащих небольшие концентрации алкоголя (кисломолочные продукты, квас и т.д.).

Так как алкоголь всасывается в кровь в течение определенного времени, может пройти более 30 минут после употребления алкоголя до достижения максимальной его концентрации в крови. Этот фактор необходимо учитывать при анализе результатов теста и назначении повторного теста.


ВНИМАНИЕ! Полоскание полости рта водой или безалкогольными напитками не уменьшает необходимый период ожидания!

б) Перед тестом обследуемый должен дышать нормально, не выполнять гипервентиляцию легких (быстрые вдохи и выдохи).

в) При выполнении теста обследуемый должен обеспечивать требуемый расход и объем выдыхаемого воздуха согласно 1.2.6 настоящего РЭ. Расход выдыхаемого воздуха должен быть постоянным (без остановок).

2.3.1.2 Вставьте новый мундштук в держатель анализатора согласно 2.2.6 настоящего РЭ.

2.3.1.3 Включение анализатора



● Нажмите и удерживайте кнопку  приблизительно 1 секунду, пока на дисплее не появится стартовое окно и не прозвучит одиночный сигнал.



2.3.1.4 Проведение теста

● Через 2 секунды на дисплей выводится информация пользователя (если опция активизирована)

или сообщение «ЖДИТЕ». Экран с информацией пользователя можно также просмотреть

нажав кнопку , закрыть - кнопкой 

● Перед началом тестирования анализатор произведет автоматический забор пробы окружающего воздуха.

При этом слышен щелчок, на дисплее несколько секунд высвечивается сообщение «Blankcheck», затем

сообщение «ЖДИТЕ» и, если алкоголя в окружающем воздухе не обнаружено, на дисплей выводится

сообщение «ГОТОВ» и звучит короткий сигнал. Одновременно выводится номер текущего теста, мигает

зеленый индикатор. Если алкоголь в окружающем воздухе обнаружен, на дисплей выводится сообщение

«Alcohol detected, device not ready! Ошибка ID: 618» и горит красный индикатор. Дождитесь автоотключения анализатора и включите анализатор повторно.

Если выключить анализатор принудительно, при повторном включении ошибка повторится. Для сброса необходимо на несколько секунд достать элементы питания анализатора и затем установить их обратно.




- Попросите обследуемого выполнить выдох в широкий вход мундштука. Выдох следует выполнять сильно, без форсирования и остановок. Правильный выдох (см. 1.2.6 настоящего РЭ) обозначается непрерывным звуковым сигналом и горящим зеленым индикатором

- В ходе отбора пробы на дисплей выводится сообщение: «ДУЙТЕ».

После отбора пробы зеленый индикатор гаснет, непрерывный звуковой сигнал отключается.

- На дисплее высвечивается: «ЖДИТЕ Идет анализ».

- Через 5 – 25 секунд (в зависимости от температуры и измеренного значения концентрации) на дисплей выводится результат измерения массовой концентрации этанола в выдыхаемом воздухе в виде «X.XX mg/L». Единицы измерений массовой концентрации этанола «мг/л» на дисплее отображаются в виде «mg/L». Дополнительно, одновременно с появлением на дисплее результата измерения звучит сигнал: 1 раз – низкий уровень, 2 раза – средний уровень, 3 раза – высокий уровень.


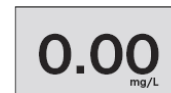


2.3.1.5 Ошибки при проведении теста

- Если объем подаваемой пробы ниже допустимого значения (см. 1.2.6 настоящего РЭ), на дисплей выводится сообщение: «Недостаточный объем», звучит короткий сигнал и мигает красный индикатор.


Для повтора теста нажмите кнопку **ОК**, через 4 секунды анализатор будет готов к новому тесту.

- Если расход подаваемой пробы ниже допустимого значения (см. 1.2.6 настоящего РЭ), при остановке выдоха или всасывании в конце отбора пробы, на дисплей выводится сообщение «Выдох прерван», звучит короткий сигнал и мигает красный индикатор. Для повтора теста нажмите кнопку **ОК**, через 4–30 секунд анализатор будет готов к новому тесту.

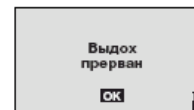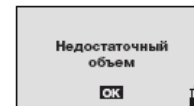

2.3.1.6 Ручной режим отбора пробы

- Если обследуемому не удастся сделать выдох, при котором срабатывает автоматический отбор пробы, т.е. не может обеспечить необходимый расход и объем выдоха (см. 1.2.6 настоящего РЭ), можно воспользоваться ручным режимом отбора пробы.

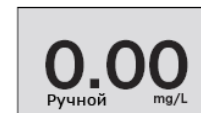

Для этого во время выдоха обследуемого нажмите кнопку «ОК», при этом анализатор произведет ручной отбор пробы. Производите ручной отбор пробы в самом конце выдоха, на который способен обследуемый.

На дисплее под результатом измерения появится надпись «Ручной».

ВНИМАНИЕ! При ручном режиме отбора пробы не обеспечиваются параметры выдоха, указанные в 1.2.6 настоящего РЭ. Погрешность измерений при ручном режиме отбора пробы может превысить пределы допустимой погрешности анализатора, указанные в 1.2.1, 1.2.4 настоящего РЭ.

2.3.1.7 Снятие мундштука

- Нажмите снизу на мундштук как показано на рисунке.
- Достаньте мундштук из держателя.
- Утилизируйте мундштук в соответствии с местными нормами.



2.3.1.8 Подготовка к проведению следующего теста

Для подготовки к следующему тесту нажмите кнопку «ОК», при этом на дисплей выводится сообщение «ЖДИТЕ».


П р и м е ч а н и е – Выключение и включение анализатора на этом этапе не уменьшает время подготовки анализатора к работе.



2.3.1.9 Выключение анализатора

- Нажмите и удерживайте кнопку «ОК», анализатор выключится через 2 секунды.
- Автоматическое выключение анализатора происходит через 4 минуты после прекращения работы.
- Анализатор автоматически выключается при низком напряжении на батареях питания/аккумуляторах.

При этом на дисплее анализатора мигает символ батареи и для продолжения работы необходимо выполнить замену батарей питания или зарядку аккумуляторов согласно 2.2.3 настоящего РЭ.

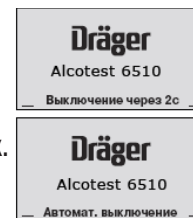

2.3.2 Порядок работы в пассивном режиме отбора пробы

ВНИМАНИЕ! Пассивный режим отбора пробы может применяться для предварительной оценки наличия/отсутствия этанола в воздухе. В этом режиме метрологические характеристики анализатора, указанные в 1.2 настоящего РЭ, не обеспечиваются.

- Держите анализатор в анализируемом воздухе, не устанавливая мундштук.
- Кратковременно нажмите кнопку «ОК». Раздастся щелчок, затем начнется анализ.
- Результат оценки появится на дисплее в виде сообщения:
 - а) «Алкоголя нет»
 - б) «Алкоголь»
- Нажмите кнопку «ОК» для проведения нового отбора.

**АЛКОГОЛЯ
НЕТ**

АЛКОГОЛЬ


2.3.3 Порядок работы в меню анализатора


2.3.3.1 Обозначения в меню

- ▶ Переход на следующий, более высокий уровень меню.
- ⊕ Пункт меню, содержащий подменю.
- ▢ Открытый пункт меню.
- └ Выбранная функция.
- ▼ Пункт под выделенным пунктом.
- ▲ Пункт над выделенным пунктом.
- ✓ Активированный пункт.
- 1/6** Активированная часть экрана.

2.3.3.2 Вход в меню




Включите анализатор. Функции меню можно вызвать, когда на дисплее появляется сообщение «ЖДИТЕ» или «ГОТОВ».

- Для входа в меню пользователя нажмите и отпустите кнопку  .


- Для входа в сервисное меню (предназначено только для специалистов сервисных центров и поверителей) нажмите и удерживайте кнопку  , затем введите PIN-код.

ВНИМАНИЕ! Информация о PIN-коде анализатора предоставляется официальным представителем изготовителя анализаторов в России ООО «СИМС-2» по отдельному запросу организациям, аккредитованным на проведение корректировки показаний или поверки.







2.3.3.3 Работа в меню

- Выберите функцию, используя кнопки  и  .
- Выбранная функция выделяется.
- Активизируйте выбранную функцию, нажав кнопку  .

2.3.3.4 Выход из меню

- Выбрав строку «Возврат в изм. режим» и нажав кнопку  можно перевести анализатор в режим измерения.
- Если никакие кнопки не нажимаются в течение 2 минут, анализатор автоматически возвращается в режим измерения.

2.3.3.5 Разделы меню пользователя:

«Последн. 10 тестов»	На дисплей выводятся результаты последних измерений, выбор данных выполняется кнопками  и  .
«Дата посл. калибр.»	На дисплей выводится дата последней корректировки показаний.
«Выбор языка»	Установка языка из числа запрограммированных кнопками  и  .
«Настройка контраста»	Установка контрастности дисплея кнопками  и  .

Возврат из выбранного раздела меню пользователя осуществляется кнопкой  .

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание анализатора производится для обеспечения постоянной исправности и готовности к эксплуатации.

Техническое обслуживание включает:

- ежедневное техническое обслуживание,
- периодическое техническое обслуживание.

3.1 Ежедневное техническое обслуживание анализатора включает в себя внешний осмотр согласно 2.2.1 настоящего РЭ.

3.2 Периодическое техническое обслуживание анализатора в течение всего периода эксплуатации включает в себя:

- замену батарей питания, заряд аккумуляторов – при появлении предупреждающего сообщения на дисплее анализатора;
- очистку внешних поверхностей анализатора – при необходимости;
- проверку показаний – при необходимости;
- корректировку показаний анализатора – не реже 1 раза в 12 месяцев;
- поверку анализатора – 1 раз в год;

3.3 Замену батарей питания, заряд аккумуляторов выполняют согласно 2.2.3 настоящего РЭ при появлении предупреждающего сообщения на дисплее анализатора.

ВНИМАНИЕ! Анализатор потребляет небольшой ток даже в выключенном состоянии. При длительном (более 6 месяцев) хранении анализатора выньте батареи питания/аккумуляторы.

3.4 Очистку внешних поверхностей анализатора выполняют с помощью одноразовых салфеток.

ВНИМАНИЕ! Не погружайте анализатор в жидкости – жидкость не должна попасть в разъемы! Не используйте средства очистки, содержащие спирт или растворители!

3.5 Проверка показаний анализатора

3.5.1 Проверку показаний анализатора может выполнять пользователь или сервисный центр при условии наличия оборудования, указанного в таблице 6.

Таблица 6


№№	Наименование средства измерений
1	Барометр-анероид метеорологический БАММ-1 по ТУ 25-11.1513-79. Цена деления: 0,1 кПа.
2	Психрометр аспирационный М-34-М по ГРПИ 405132.001 ТУ. Диапазон измерений от 10 % до 100 %.
3	Термометр лабораторный ТЛ4 по ГОСТ 28498-81. Диапазон измерений от 0 °С до 50 °С. Цена деления: 0,1 °С.
4	Поверочный нулевой газ воздух марки Б по ТУ 6-21-5-82 в баллоне под давлением.
5	Ротаметр РМ-0,63 ГУЗ по ГОСТ 13045-81. Верхний предел измерений объемного расхода 0,63 м ³ /ч, пределы допускаемой относительной погрешности ± 2,5 % от верхнего предела измерения.
6	Вентиль точной регулировки ВТР-1 или ВТР-1-М160. Диапазон рабочего давления от 0 до 150 кгс/см ² , диаметр условного прохода 3 мм.
7	Трубка медицинская из поливинилхлорида, 6х1,5 мм
8	Генератор газовых смесей паров этанола в воздухе Alcotest CU34 – рабочий эталон 1-го разряда по ГОСТ 8.578-2008 в комплекте со стандартными образцами состава водных растворов этанола ВРЭ-2: ГСО 8789-2006. Пределы допускаемой относительной погрешности: ± 5 %.
<p>Примечания:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) При поверке вместо поверочного нулевого газа воздух допускается применять азот газообразный особой чистоты 1-го или 2-го сорта по ГОСТ 9293-74 в баллоне под давлением. 2) Допускается применение других средств поверки, не приведенных в таблице, метрологические характеристики которых не хуже указанных в таблице. 3) Все средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке, ГС в баллонах под давлением и стандартные образцы состава водных растворов этанола – действующие паспорта. 	

3.5.2 Проверку показаний анализатора следует проводить при следующих условиях:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) диапазон температуры окружающего воздуха, °С: | от 20 до 25; |
| 2) диапазон относительной влажности окружающего воздуха, %: | от 30 до 80; |
| 3) диапазон атмосферного давления, кПа: | от 90,6 до 104,8; |
| 4) анализатор выдержан в условиях измерений | не менее 2 часов. |

3.5.3 Проверку показаний анализатора проводят в последовательности:

а) Собирают газовую систему согласно рисунку 3. Генератор располагают так, чтобы на него не падали прямые солнечные лучи и вблизи отсутствовали источники охлаждения или нагрева. Длина соединительной трубки на выходном штуцере генератора – не более 5 см. Перед заливкой раствора в генератор проверяют отсутствие влаги и конденсата на внутренней поверхности емкости для раствора генератора, соединительных трубок и мундштуков, при наличии влаги или конденсата необходимо просушить все элементы генератора. Подачу ГС на вход анализаторов осуществляют через мундштук, входящий в комплект анализаторов.

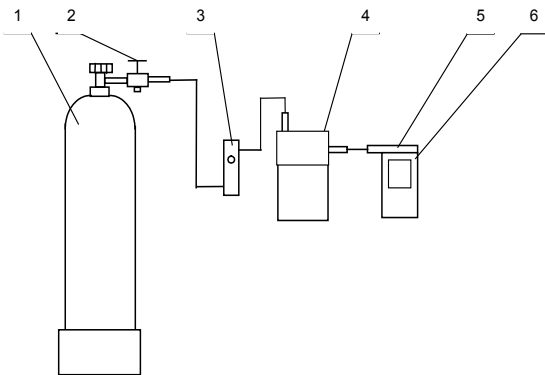

- 1 – баллон с воздухом; 2 – вентиль; 3 – ротаметр; 4 – генератор;
5 – мундштук из комплекта анализатора; 6 – анализатор

Рисунок 3 – Газовая система для подачи на анализатор ГС от генератора газовых смесей паров этанола в воздухе Alcotest CU34.

б) В соответствии с РЭ генератора приготавливают ГС с массовой концентрацией этанола $(0,475 \pm 0,048)$ мг/л, используя соответствующий водный раствор этанола с массовой концентрацией этанола $(1,22 \pm 0,12)$ мг/см³.

в) Рассчитывают действительное значение массовой концентрации этанола в ГС на выходе генератора $C^Д$, мг/л, по формуле

$$C^Д = 0,38866 \cdot c_p^Д, \quad (1)$$

где $c_p^Д$ – аттестованное значение массовой концентрации этанола в используемом стандартном образце состава водного раствора этанола, указанное в паспорте, мг/см³.

г) Проведите измерение по схеме:

- включите анализатор согласно 2.3.1.3 настоящего РЭ;
- при отсоединенном анализаторе откройте баллон с воздухом и с помощью вентиля точной регулировки, контролируя по ротаметру, установите расход ГС на выходе генератора 10 л/мин;
- подсоедините анализатор;
- после отбора пробы зеленый индикатор гаснет, непрерывный звуковой сигнал отключается, на дисплее высвечивается: «ЖДИТЕ Идет анализ»;
- отсоедините анализатор и закройте вентиль на баллоне;
- зарегистрируйте показание анализатора C , мг/л.

д) Рассчитайте относительную погрешность δ , %, по формуле

$$\delta = \frac{C - C^Д}{C^Д} \cdot 100, \quad (2)$$

е) Результаты проверки показаний считают положительными, если полученная погрешность не превышает ± 10 %. В противном случае выполняют корректировку показаний и поверку анализатора согласно 3.7 и 3.8 настоящего РЭ.

Примечания:

- 1) Заменяйте мундштук на входе анализатора на новый после каждых 8 тестов или если внутри мундштука собрались капли жидкости.
- 2) Заменяйте водный раствор этанола в генераторе на новый в соответствии с требованиями РЭ генератора.

3.6 Корректировка показаний анализатора

Корректировка показаний анализатора проводится при каждой поверке. После проведения корректировки показаний анализатор обязательно подлежит поверке. Инструкция по корректировке показаний предоставляется официальным представителем изготовителя анализаторов в России ООО «СИМС-2» по отдельному запросу организациям, аккредитованным на проведение корректировки показаний или поверки.

Работы по корректировке показаний отмечаются в паспорте анализатора (в разделе технического обслуживания).

3.7 Поверка анализатора

Поверка анализатора осуществляется по документу МП-242-1467-2013 «Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе Alcotest модели 6510, 6810. Методика поверки», разработанному и утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 22 февраля 2013 г.

Основные средства поверки:

- генератор газовых смесей паров этанола в воздухе Alcotest CU34 – рабочий эталон 1-го разряда по ГОСТ 8.578-2008 в комплекте со стандартными образцами состава водных растворов этанола ВРЭ-2: ГСО 8789-2006 или
- стандартные образцы состава газовых смесей C₂H₅OH/N₂ в баллонах под давлением по ТУ 6-16-2956-92: ГСО 8364-2003, ГСО 8366-2003.

Интервал между поверками – 1 год.

ВНИМАНИЕ! Ответственность за своевременное выполнение работ по корректировке показаний и поверке анализатора несет пользователь анализатора.

4. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

4.1 Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 7.

Т а б л и ц а 7

Возможная неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
1. Анализатор автоматически выключается	а) Низкое напряжение на батареях питания/аккумуляторах б) Автоматическое выключение анализатора через 4 минуты после прекращения работы	а) Замените батареи питания/зарядите аккумуляторы б) Повторно включите анализатор
2. Анализатор автоматически выходит из режима меню в режим измерения	Автоматический переход в режим измерения через 2 минуты после прекращения работы в режиме меню	Выключите анализатор и повторно зайдите в режим меню
3. Анализатор не выключается	Низкое напряжение на батареях питания/аккумуляторах	Замените батареи питания/зарядите аккумуляторы
4. При выполнении выдоха на дисплее появляется сообщение «Недостаточный объем» или «Выдох прерван»	Объем или расход подаваемой пробы воздуха ниже допустимого значения (см. 1.2.6 настоящего РЭ)	Повторите выдох. При выполнении теста обследуемый должен обеспечивать требуемый расход и объем выдыхаемого воздуха согласно 1.2.6 настоящего РЭ. Расход выдыхаемого воздуха должен быть постоянным (без остановок).

Возможная неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
5. На дисплее анализатора отсутствует индикация	а) Электростатический заряд анализатора б) Неисправность дисплея	а) выньте и повторно установите батареи питания/аккумуляторы (через 2-5 с) б) Направьте анализатор на ремонт в сервисный центр
6. Сообщение на дисплее «Калибровка Ошибка»	Отрицательный результат корректировки показаний	Повторите корректировку показаний, при повторной ошибке направьте анализатор на ремонт в сервисный центр
7. Сообщение на дисплее «Проверка Ошибка»	Отрицательный результат проверки показаний	Проведите корректировку показаний анализатора и повторную проверку показаний
8. Сообщение на дисплее «↑↑↑»	Содержание этанола в отобранной пробе превышает верхний предел показаний анализатора	Повторите измерение
9. Сообщение на дисплее «Внутренняя системная Ошибка» с сервисным кодом	Неисправность анализатора, выполнение измерений невозможно	Выньте и повторно установите батареи питания/аккумуляторы (через 2-5с), при повторной ошибке направьте анализатор на ремонт в сервисный центр

4.2 Анализаторы должны обслуживаться только обученным сервисным персоналом.

Рекомендуется заключить сервисный контракт с авторизованным сервис-центром «Dräger Safety AG & Co. KGaA» и поручать ей проведение любых ремонтных работ.

4.3 При техническом обслуживании анализатора должны использоваться только оригинальные запасные элементы фирмы «Dräger Safety AG & Co. KGaA».

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Анализаторы транспортируются в транспортной таре предприятия-изготовителя или дистрибьютора в крытых транспортных средствах.

5.2 При длительном (более 6 месяцев) хранении анализатора выньте батареи питания/аккумуляторы.

5.3 Хранение анализаторов должно проводиться в закрытых помещениях при температуре от минус 40 °С до 70 °С. **ВНИМАНИЕ!** Не следует хранить анализаторы в помещениях, где могут присутствовать пары этанола или рядом с жидкостями, содержащими алкоголь.

5.4 Условия утилизации:

- Батареи питания/аккумуляторы утилизируются только как специальные отходы, согласно государственным нормам утилизации отходов. Информацию можно получить в местных экологических учреждениях, а также в компаниях, занимающихся утилизацией отходов. Батареи питания/аккумуляторы запрещается бросать в открытый огонь! Батареи питания запрещается перезаряжать!
- По завершению срока службы анализатора утилизируйте его согласно национальным нормам по утилизации отходов, или договоритесь с компанией по утилизации отходов об утилизации анализатора. Подробную информацию можно получить в местных органах по охране окружающей среды.

